



Sistemas SciLog® NFF

Sistema de Filtración de Flujo Normal Automatizado

SciLog® NFF es una plataforma para sistemas de un solo uso en aplicaciones de filtración de flujo normal, desde pequeñas producciones hasta escala industrial

SciLog® NFF es un sistema que supervisa, ajusta y documenta las presiones y tasas de flujo para optimizar el tiempo de procesamiento y maximizar la eficiencia y vida útil del filtro. Mediante los sensores incorporados, el sistema totalmente automático elimina la necesidad de supervisión durante la producción. Gracias al diseño de arquitectura abierta, el sistema es compatible con filtros y membranas ya existentes, sean de Parker o de un fabricante diferente.

Gracias a la pantalla táctil y el software operacional preinstalado, los usuarios de SciLog® NFF pueden elegir entre cuatro métodos de control diferentes para llevar a cabo el proceso de filtración normal de flujo (NFF). El sistema cuenta con límites y alarmas programables que permiten un funcionamiento totalmente automatizado, seguro y consistente.

La tecnología patentada permite respuestas automatizadas del sistema compatibles con los sensores de presión SciPress® II. También permite el mantenimiento de una tasa de flujo y presión de entrada del filtro seleccionables por el usuario.

El sistema puede optimizar el rendimiento de filtración hasta un 30% más a la vez que transmite parámetros por medio de OPC a un registro de datos históricos. Se pueden integrar hasta dos básculas opcionales para proporcionar filtración precisa controlando las operaciones gravimétricamente.

Aplicaciones Técnicas Maquinsa, S.L. dispone de una zona de manipulación bajo norma ISO 9001/2015 y en la que se manipulan los materiales bajo las normas BPF (GMPs).

Bajo demanda podemos fabricar y manipular nuestros productos en sala blanca bajo norma. Nuestras plantas pueden ser auditadas a su requerimiento.

► Principales Beneficios

- Sistema automatizado que mejora el rendimiento del filtro usando el método R/P Stat patentado
- Se puede configurar para procesos múltiples o flexibles
- Compatible con cualquier filtro disponible
- Interfaz con pantalla táctil para el control y supervisión del proceso
- Se puede integrar a sistemas ya existentes para la colecta de datos y el control del proceso
- Móvil y compacto
- Báscula opcional integrada para filtración altamente precisa

► Aplicaciones

- Filtración de virus
- Cosecha de células
- Carga de columnas de cromatografía
- Clarificación y esterilización
- Reducción de micoplasma
- Reducción de carga biológica

Calle Joaquín Sorolla, 63
28522, Rivas Vaciamadrid (Madrid)
914 990 210 / www.atm.es / info@atm.es

► Relacionados



Sensores Parker
SciLog®



Sistemas de Laboratorio
Automáticos



Filtros Parker



SciLog® NFF Systems

- intelligent bioprocessing system
- automated normal flow filtration

The SciLog® NFF is a proven automated single-use platform used in discovery to production-scale normal flow applications.

Parker's SciLog® NFF automated single-use normal flow filtration (NFF) system automatically monitors, adjusts and documents pressures and flow rate to optimize processing times, and maximize filter life and efficiency. Using the onboard sensors and automation we eliminate the need for constant monitoring during production runs. The system's 'Open Architecture' design means there is no need to change existing filter or membrane types / manufacturers because this system will work with any supplier's filter.

Via a color, touch screen and pre-installed operational software, users have the ability to execute a normal flow filtration process via four different control methods. User-selectable end points and alarms enable walk-away operation and ensure safe, consistent process performance. Patented, proprietary technology enables automated system response to in-line SciPres® II pressure sensor feedback and the selectable maintenance of a user-definable flow rate, inlet filter pressure, or both. The system can optimize your filtration throughput by up to 30% while communicating real time process parameters via OPC to a plant historian. Up to two optional integrated scales can be used to deliver filtration precision by gravimetrically controlling operations.

Features and Benefits

- Walk-away automation improves filter throughput using patented R/P Stat Method
- Configurable for multiple or flexible processes
- Accommodates any commercially available filter
- Touch-screen interface for process monitoring and control
- Integration with plant systems for data collection and process control
- Mobile and compact base
- User configurable alarms and interlocks
- Optional integrated scale for highly accurate filtration endpoints



Additional configurations and pump options available.

The automated SciLog® NFF System offers four modes of process control:

- **Constant Rate:**
Maintain rate, monitor pressure.
The system will ensure pressure does not exceed a high limit set point.
- **Constant Pressure:**
Maintain pressure, monitor rate.
The system will ensure rate does not exceed a minimum set point.
- **R/P Stat Method:**
The system maintains a constant rate, monitoring pressure until a selectable pressure is reached. At this pressure, the system immediately switches to constant pressure, monitoring rate (see Figure 1.) until a minimum set point is reached.
- **Manual Operation:**
User definable motor set point

Process Repeatability:

Recipes can be conveniently stored and recalled at the time of execution to save time and reduce the risk of parameters being installed incorrectly.

Applications

- | |
|---------------------------------|
| Viral filtration |
| Cell harvesting |
| Chromatography column loading |
| Clarification and sterilization |
| Mycoplasma reduction |
| Bioburden reduction |

Performance Characteristics

R/P Stat Method

The SciLog® NFF System incorporates the patented R/P Stat Method, an innovation which has resulted in significant improvements in filter life expectancy. This is done by selecting three simple process variables including initial flow rate, maximum inlet pressure, and minimum flow rate. By using the R/P Stat Method, as the membrane begins to foul, the NFF system automatically adjusts the flow rate which allows additional product to pass through the filter before the membrane fouls.

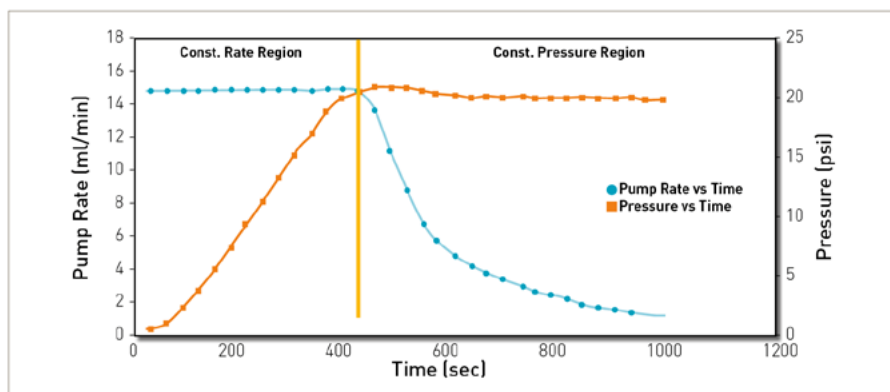


Fig. 1 - Normal Flow Filtration by R/P Stat Method

Specifications

	Description
Dimension	Footprint as small as 24"x 24" (0.6096m x 0.6096m), varies by model.
Enclosure & Rating	304 stainless steel framework, mobile platform with pharmaceutical grade casters, NEMA 4X, IP65 rated cabinet.
Pressure Sensors	Standard system has 3 pressure sensors. Additional sensors can be added as needed.
Power	208V single phase, 60Hz, 20A; or 208V three phase, 60Hz, 20A; or 220V +/- 10% single phase, 50 Hz, 20A.
I/O Ports	Ethernet port for plant communication. Connections for 2 x scales to monitor flux of media through filter.
Operational Mode	Constant rate, R/P Stat Method, constant pressure and manual mode.
Pump Options	Peristaltic or Diaphragm
Flow Rates	0.001 - 80 LPM (depends on selected pump option)

Options and Accessories

- IQ/OQ documentation package to support validation efforts
- SciLog® sensors
- Single-use bioprocessing containers and manifolds
- WeighStation™
- Test manifold
- Several possible pump configurations